



Compatibile con i kit di trasporto virale (VTM) senza denaturare le proteine

Test rapido NADAL® COVID-19 Ag

Test rapido per la rilevazione di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni rinofaringei e orofaringei umani

L'importanza di un test rapido dell'antigene COVID-19

"Ogni categoria di test diagnostici ha un ruolo unico nella lotta contro questo virus".

– U.S. Food and Drug Administration

Mentre il test rapido NADAL® COVID-19 IgG/IgM* rileva il virus indirettamente, il test rapido NADAL® COVID-19 Antigen lo rileva direttamente cercando la presenza di proteine specifiche del virus SARS-CoV-2. In questo modo, la rilevazione dell'antigene risolve una lacuna diagnostica. La proteina nucleocapside (N) è ideale per la rilevazione del virus, essendo molto presente nel virus e sufficientemente specifica per la SARS-CoV-2. È una delle 4 proteine strutturali più importanti ed è coinvolta nella replicazione, trascrizione e confezionamento del genoma virale.


Test rapido NADAL® COVID-19 Ag

Il Test rapido NADAL® COVID-19 Ag è un immunodosaggio cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni rinofaringei e orofaringei umani. Questo test è destinato ad essere utilizzato come ausilio nella diagnosi delle infezioni da SARS-CoV-2. Si noti che la concentrazione di antigeni nucleoproteici virali può variare nel corso della malattia e può scendere al di


sotto del limite di rilevazione del test. Non si può escludere una possibile infettività dei soggetti in base ai risultati negativi del test.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

- ✓ Alta specificità
- ✓ Altamente sensibile con elevati carichi virali
- ✓ Di facile utilizzo
- ✓ Risultati rapidi e affidabili in soli 15 minuti
- ✓ I test possono essere eseguiti utilizzando campioni naso- e orofaringei
- ✓ Può essere conservato a temperatura ambiente
- ✓ Tutti i componenti del test – compresi i tamponi sterili – sono inclusi
- ✓ Nessuna reattività incrociata con coronavirus patogeni umani (come hCoV-229E, -HKU1, -NL63 e -OC43) o virus influenzali (come l'influenza A/B)

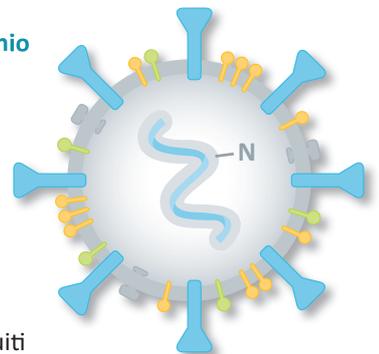

Procedura Test

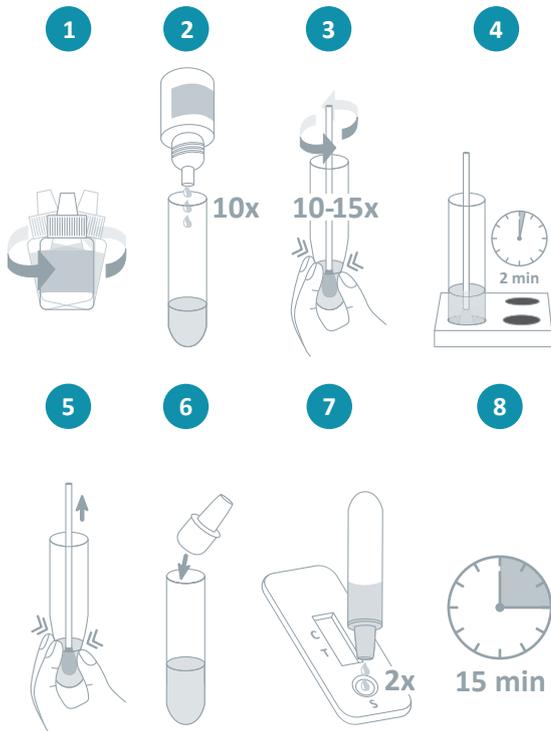


Informazioni più dettagliate nelle istruzioni per l'uso.


Interpretazione dei risultati



Colmare una carenza di diagnosi – finestra di rilevazione simile alla PCR

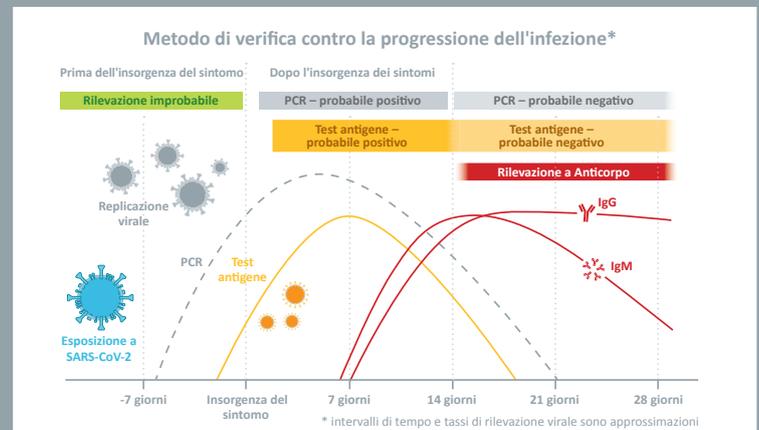

Identificazione dei pazienti con alte cariche virali – sensibilità simile alla PCR a valori di $C_t \leq 30$

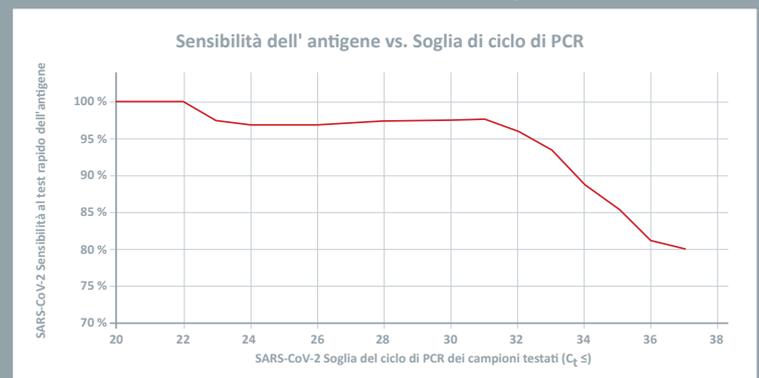

Test rapido NADAL® COVID-19 Ag

Test rapido per la rilevazione di antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni rinofaringei e orofaringei umani

Prodotto	Certificazione	Campione	Sensibilità	Specificità	Codice Prodotto	Dimensioni della confezione
Test a cassetta NADAL® COVID-19 Ag	CE	Naso- e campioni orofaringei	97,56 % (C_t capacità 20-30)	> 99,9 %	243103N-20	20 test per pacco

Materiali forniti: Test a cassetta • tamponi sterili • provette di estrazione incl. tappi contagocce • porta reagenti • flacone tampone • foglietto illustrativo

Rev02.02/XX0705en00078
Rev02.02/IT05it00018

We help you care!

- Test Rapidi
- Diagnostica di Laboratorio
- Servizi di Laboratorio
- Consulenza & Servizi